


1. Dérouler le matelas sur le lit et le fixer solidement à la section mobile (non à la base), à l'aide des cordons appropriés.
2. Accrocher l'unité de contrôle (pompe) au pied du lit.
3. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise murale avec mise à la terre.
4. S'assurer que le connecteur des tuyaux est bien inséré dans la pompe. Appuyer fermement jusqu'à entendre un clic.
5. S'assurer que la clé CPR est fermée avant le gonflage (située au pied du matelas du côté gauche).
6. Mettre la pompe en marche à l'aide du bouton Power (ON/OFF).
7. Mettre la pompe en mode d'alternance de pression à l'aide du bouton AP (s'assurer que la lumière est allumée)
8. Appuyer sur le bouton AutoSet (s'assurer que la lumière est allumée)
9. Sur l'écran de la pompe, les chiffres des zones d'alternances devraient être:
 - Zone 1 = 22 et Zone 2 = 7 ou Zone 1 = 7 et Zone 2 = 22 (voir à la fin du document pour ajuster ce paramètre)
10. Appuyer sur le cadenas (power) 5 secondes pour barrer l'accès à la pompe (tenir jusqu'à un bip et que la lumière sur le cadenas s'allume)
*** Le bouton Max demeure accessible, même quand le compresseur est barré pour les soins et transferts ***

Pour un ajustement personnalisé, voir à la fin du document

Panneau de façade

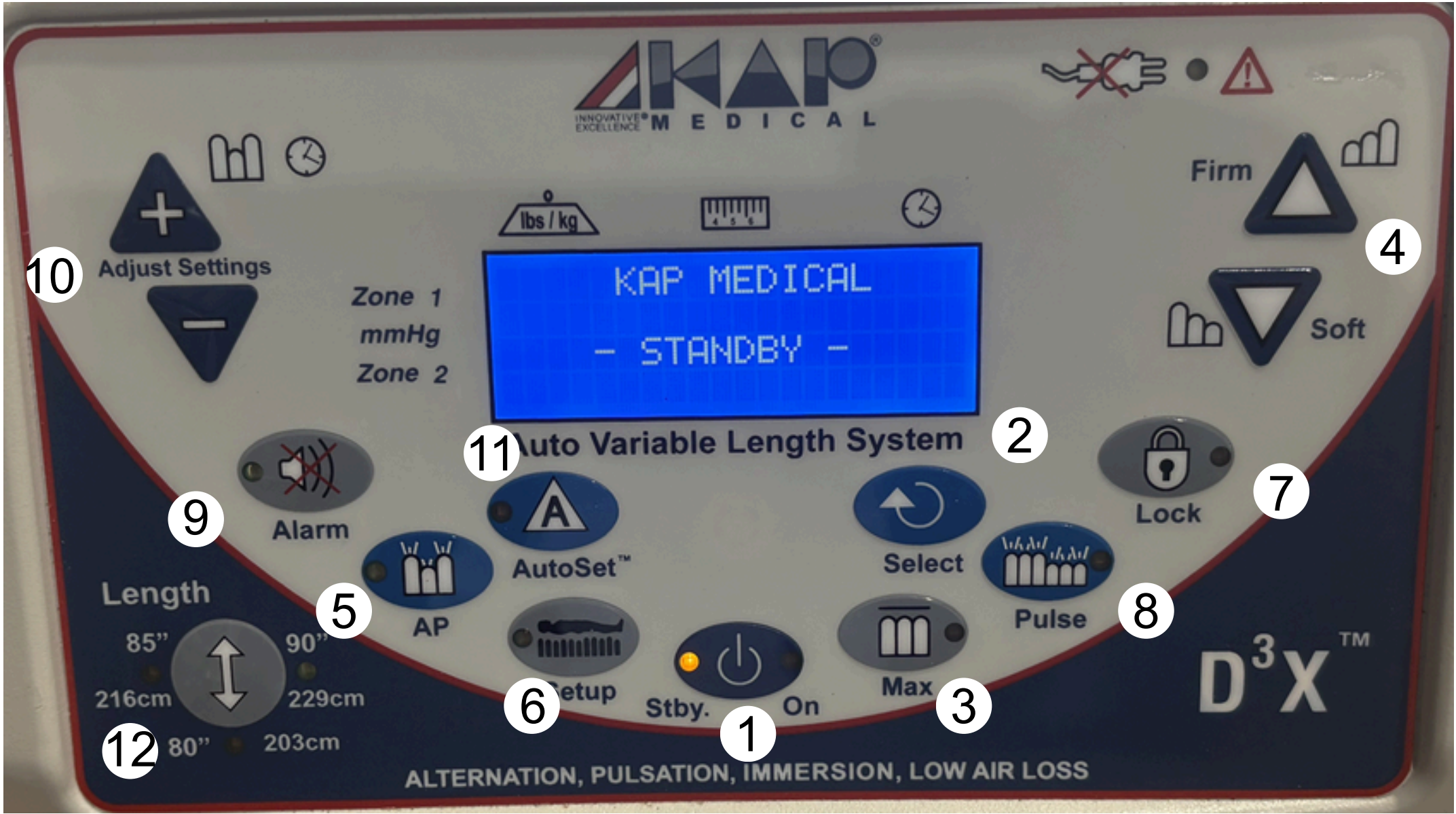

1- RÉGLAGE DU PANNEAU DE CONTRÔLE

1	On-Off / Marche-arrêt
2	Confirm Menu and static mode/ Confirmation Menu et mode statique
3	Max Inflate and LAL/ Gonflement maximal et faible perte d'air
4	Patient Comfort Control level/ Niveau de contrôle pour le confort du patient(manuelle)
5	Alternating Pressure/ Mode alternance de pression
6	Patient set up (height and weight)/ Réglages patient (grandeur et poids)
7	Lock Out/ Bloquer
8	Pulse / Pulsation
9	Silent/Silence
10	Cycle Time/Temps du cycle
11	Automatic adjustment / Ajustement automatique du poids.
12	Height adjustment / Ajustement de la longueur.

2- RÉANIMATION CARDIAQUE

- Tourner la valve du CPR située sur le côté gauche du matelas aux pieds.
- Le matelas se dégonflera rapidement pour permettre la réanimation.

3- MODE TRANSPORT OU PANNE ÉLECTRIQUE

Une mousse de sécurité intégrée soutient le patient lors d'un transport ou d'une panne d'alimentation. Aucune action supplémentaire n'est requise

4- GUIDE DE DÉPANNAGE

Situation	Cause Possible	Solution
Le matelas ne se gonfle pas correctement	1. Tuyau du matelas débranché 2. Tuyau d'air plié ou fendu 3. Fuite majeure dans le coussin d'air ou le coussin de recouvrement 4. Collecteur plié ou fendu 5. L'unité de contrôle ne fonctionne pas 6. Dysfonctionnement du compresseur	1. Connectez les raccords de tuyau et verrouillez-les en place 2. Dépliez le tuyau ou remplacez le tuyau fendu 3. Remplacez le coussin d'air ou le coussin de recouvrement qui fuit 4. Dépliez le collecteur ou remplacez le collecteur divisé 5. Renvoyez l'unité de commande à l'usine pour réparation 6. Renvoyer l'unité de commande à l'usine pour réparation
Pas d'alimentation	1. Unité de contrôle éteinte 2. Cordon d'alimentation débranché 3. Pas de pouvoir dans le pouvoir la source 4. Panne de courant 5. Fusible grillé	1. Vérifiez la source d'alimentation et allumez l'appareil 2. Connectez le cordon à la source d'alimentation 3. S'assurer que la source d'alimentation fonctionne, puis allumer l'appareil 4. Attendez que la source d'alimentation soit alimentée 5. Renvoyez l'unité de commande à l'usine pour réparation
L'unité de contrôle ne répond pas	1. l'unité se verrouille	• Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité de contrôle, attendez 15 minutes et • Rebranchez le cordon pour réinitialiser l'unité de contrôle


5- ENTRETIEN

Désinfection régulière selon votre protocole (pas de phénol).

6- AJUSTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES


- Pour ajuster le paramètre de l'alternance de pression:
 - Appuyer sur AP pour 5 secondes.
 - Ajuster le % de la zone la plus basse (35% est réputé être le meilleur ajustement de base)
 - Accepter le changement avec la flèche du centre
- Pour ajuster la pression au pieds:
 - Utiliser le cadran d'ajustement aux pied du matelas

- #1 = 27 mmHg
- #2 = 23 mmHg
- #3 = 14 mmHg
- #4 = 4 mmHg

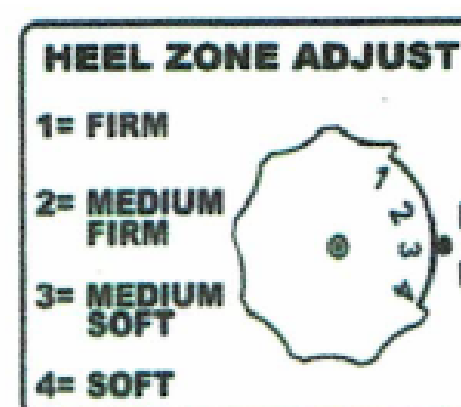

FIRM (1)	= 27 ± 4 mmHg
MEDIUM FIRM (2)	= 23 ± 4 mmHg
MEDIUM SOFT (3)	= 14 ± 4 mmHg
SOFT (4)	= 4 ± 2 mmHg

- Pour allonger le matelas en 85 et 90 pouces (utiliser le cadran au bout du lit)
 - i. Pour 80" en longueur : Tourner le sélecteur à la position 1
 - ii. Pour 85" en longueur : Tourner le sélecteur à la position 2
 - iii. Pour 90" en longueur : Tourner le sélecteur à la position 3

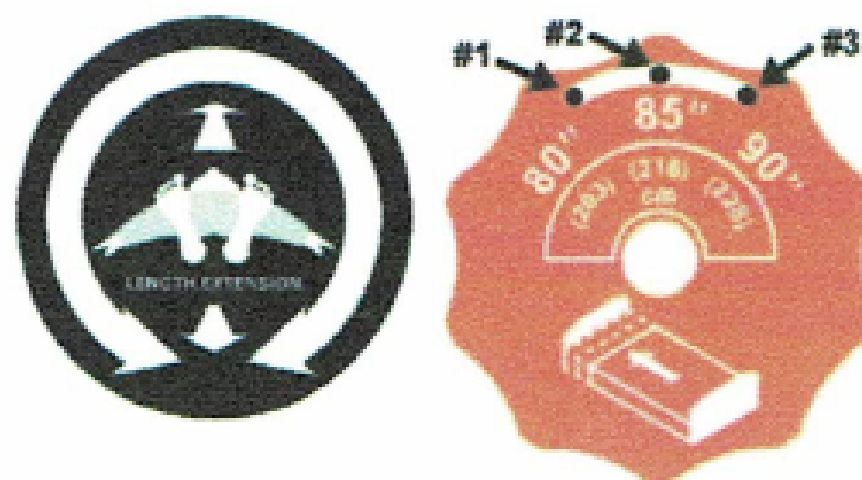

1. To inflate mattress to 80" in length, rotate the valve selector to position #1.
2. To inflate mattress to 85" in length, rotate the valve selector to position #2.
3. To inflate mattress to 90" in length, rotate the valve selector to position #3.