

Procédure pour l'ajustement de départ

Bouton	Étape	Action	Bouton	Étape	Action
	1	Si la pompe n'est pas déjà en fonction, veuillez allumer la pompe.		6	Avec les flèches +/- de gauche, ajustez le pourcentage désiré.
	2	Si le bouton « Lock » est activé, appuyez 5 secondes dessus pour le désactiver.		7	Appuyez 1 fois sur « AP » pour enregistrer.
	3	Appuyez sur le bouton « Setup » 2 fois pour afficher « CUSTOM » à l'écran.		8	Avec les flèches +/- de gauche, ajustez « AP » à 5 min.
	4	Avec les flèches Firm /Soft de droite, augmentez ou diminuez la pression selon le tableau d'ajustement de départ.		9	Afin de sécuriser les paramètres, appuyez sur « Lock »
	5	Appuyez 5 secondes sur « AP ».	<i>Les boutons « LAL » (Low Air Loss) et « Max » resteront accessibles malgré le cadenas barré.</i>		

Si vous ne connaissez pas le poids de l'utilisateur, mettre **28-16, 60% AP à 5 min** (VOIR ÉCRAN POMPE CI-DESSOUS et procédure).



AUTRES PARAMÈTRES

-  **Verrouillage de l'écran**
Appuyer 5 secondes sur le cadenas. Seul le bouton « LAL /Max » reste accessible en mode verrouillé.
-  **LAL (Low Air Loss)**
Activer en cas de sudation excessive ou d'humidité
-  **Max**
Activer lors de soins, transferts et mobilisations (se remet en alternance AP aux 30 min pour des raisons de sécurité)
-  **Pulse**
Effet vague, stimulation douce par pulsations.

Ce matelas est muni du mode dossier relevé (Seat Inflate), un système d'ajustement automatique du gonflage conçu pour optimiser le soutien lors du relevage du dossier.




Ajustements de départ

SURFACES K2M, K2MP, K2ME | MODE « CUSTOM »

Si vous ne connaissez pas le poids de l'utilisateur, mettre :

	28	60%	28-16	5 min
Poids kg / lb	mmHg	%AP	mmHg zone 1 et mmHg zone 2	AP (durée)
23 kg / 50 lb	18	75	18 - 13	5 min
34 kg / 75 lb	20	75	20 - 15	5 min
45 kg / 100 lb	22	60	22 - 13	5 min
57 kg / 125 lb	23	50	23 - 11	5 min
68 kg / 150 lb	24	50	24 - 12	5 min
79 kg / 175 lb	25	50	25 - 12	5 min
91 kg / 200 lb	26	50	26 - 13	5 min
102 kg / 225 lb	27	50	27 - 13	5 min
113 kg / 250 lb	28	60	28 - 16	5 min
125 kg / 275 lb	29	60	29 - 17	5 min
136 kg / 300 lb	30	75	30 - 22	5 min
147 kg / 325 lb	32	75	32 - 24	5 min
159 kg / 350 lb	32	75	32 - 24	5 min

Pour toute question relative aux autres paramètres, n'hésitez pas à nous contacter.

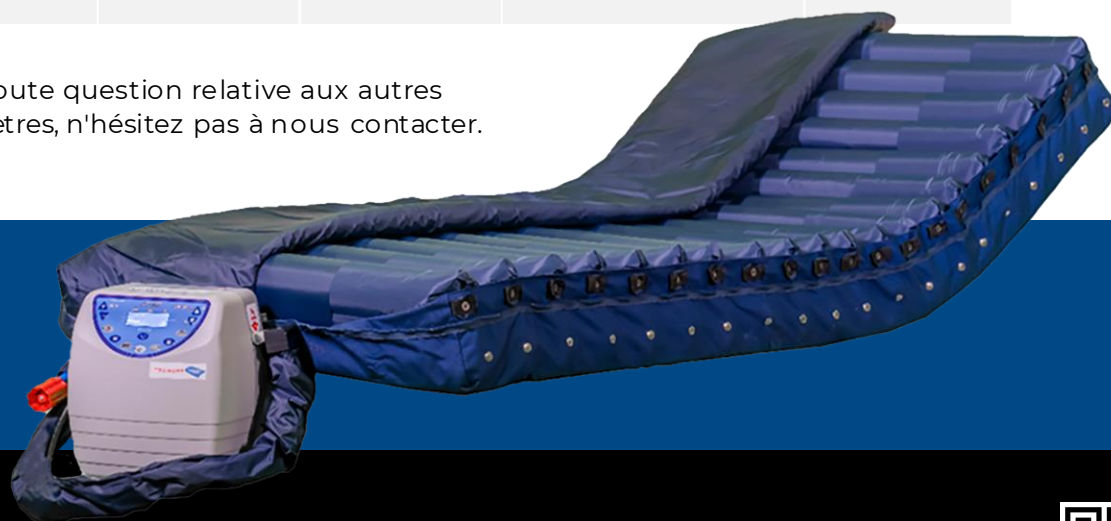

Leika Équipements médicaux
medicaux@leika.ca | 1877 659-1991 | 450 659-1991

Consulter notre
procédure en vidéo

