


SURFACE HYBRIDE AIR/MOUSSE

Système thérapeutique air/mousse convertible, non motorisé



- Matelas de remplacement non motorisé, utilisable sans unité de commande.
- Le P.R.O. Matt® Plus peut être converti pour offrir une thérapie à pression alternée, grâce à l'ajout d'une unité de commande optionnelle.
- En mode non motorisé, le système à quatre zones (tête, épaules, torse, pieds) reproduit, grâce à son noyau d'air, le profil de pression d'un matelas thérapeutique à faible perte d'air.
- La valve P.R.O. Technology® maintient une pression optimale dans chaque zone thérapeutique pour une redistribution supérieure de la pression, quels que soient le poids et le profil du patient.
- Une surcouche viscoélastique d'un pouce améliore la redistribution de pression et le confort du patient.

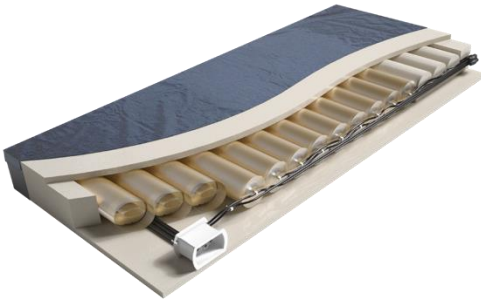

Plus de fonctionnalités et d'avantages

- Le pourtour ferme assure stabilité et sécurité en éliminant les espaces entre le cadre de lit et les ridelles ou dispositifs d'aide.
 - Assure une sécurité accrue lorsque les parois latérales surélevées en option ne sont pas utilisées.
 - Comprend une découpe qui facilite l'entrée et la sortie du lit.
- Conception autocalibrante ne nécessitant aucun gonflage manuel.
- Housse thérapeutique en nylon imperméable de série, à faible friction et faible cisaillement.
- Parois latérales surélevées et housse extensible offertes en option.
- Sans entretien, à l'exception du nettoyage normal de la surface.

Spécifications du matelas

CAPACITÉ DE POIDS MAXIMALE¹

500 lb

HOUSSE

Nylon avec fermeture éclair ou tissu extensible bidirectionnel

BREVET AMÉRICAIN

#8261387, #8615831

DIMENSIONS DU MATELAS

Largeur : 36 po (91,4 cm) ou 42 po (106,7 cm)
Longueur : 80 po (203,2 cm) ou 84 po (213,4 cm)
Hauteur : 7 po (17,8 cm)

GARANTIE

Matelas : 5 ans
Housse : 1 an

¹ Capacité de poids du matelas seulement; le poids total ne doit pas dépasser la capacité de charge précisée par le fabricant du cadre de lit. Leika se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.



SPÉCIFICATIONS DE L'UNITÉ DE COMMANDE EN OPTION

Fonctionnalité	Unité de commande P.R.O. Technology	Unité de commande de base CBC
Dimensions	12,4 po l x 7,7 po h x 4,3 po p (31,5 cm l x 19,5 cm h x 4,3 cm p)	11,18 po l x 5,6 po h x 3,5 po p
Poids	6 lb (2,7 kg)	4,2 lb
Réglages de confort	5	10
Durées de cycle	5, 10, 15, 20 minutes	10 minutes
Modes de fonctionnement	3 - Autofirm, alternée et thérapie	2 - Alternée et statique
Verrouillage	Oui	Non
Alarme de basse pression	Oui	Oui
Garantie	1 an	1 an
Homologations	IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-11 CAN/CSA C22.2 No. 60601-1	Classifié UL : UL 60601-1 CAN/CSA C22.2 n° 60601-1
Alim. électrique	100-240 V c.a., 50/60 Hz, 0,2-1 A	120 V c.a., 60 Hz, 0,6 A

Indications cliniques

REDISTRIBUTION DE LA PRESSION

Lésions de pression de stade 1 à 4²;
 réadaptation; brûlures; neurologie;
 dermatologie; amputations

GESTION DE LA PRESSION

VIH/sida; arthrite; oncologie

² En mode non motorisé, la conception du P.R.O. Matt® Plus permet d'offrir des pressions d'interface optimales grâce à un gonflage contrôlé des cellules d'air, pour les patients à risque, dans la prévention et le traitement des lésions non compliquées de stade 3 et 4 chez les patients pouvant être repositionnés sur plusieurs surfaces corporelles. Pour le traitement des lésions de stade 3 ou 4, le personnel soignant devrait pouvoir positionner le patient de manière à éviter toute pression sur la plaie dans au moins deux positions.

En mode motorisé à pression alternée, le P.R.O. Matt® Plus ajoute l'avantage d'une décharge cyclique pour le traitement avancé des lésions de pression non compliquées de stade 3 ou 4, chez les patients pour qui cette thérapie peut améliorer la redistribution de la pression et la circulation. Dans tous les cas, les indications cliniques de Leika sont des lignes directrices et ne doivent être considérées que comme des recommandations à prendre en compte lors de l'évaluation individuelle du patient par le clinicien.

